

Uso previsto

La prueba FLASH VetID™ para muestras de hisopado rectal o fecal es una prueba de ácidos nucleicos de un solo objetivo, diseñada para usarse con el sistema FLASH Base™ o FLASH Piccolo™, para la detección cualitativa de secuencias de ácidos nucleicos del patógeno objetivo en muestras de hisopado rectal o fecal. Un resultado positivo indica la presencia de ácidos nucleicos del patógeno objetivo en la muestra. Un resultado positivo no descarta coinfección con otras bacterias, protozoarios o virus. Es necesaria la correlación clínica con el historial médico y otra información diagnóstica para determinar el estado de infección. El agente detectado podría no ser la causa definitiva de la enfermedad. Un resultado negativo no descarta la infección por el patógeno objetivo y no debe usarse como única base para decisiones de tratamiento u otro manejo del paciente. Un resultado negativo debe combinarse con los signos clínicos y el historial del paciente. La prueba FLASH VetID™ debe ser realizada por usuarios calificados en clínicas y hospitales veterinarios.

Principio de la prueba

La prueba FLASH VetID™ para muestras de hisopado rectal o fecal es una prueba molecular in vitro para la detección cualitativa de ácidos nucleicos del patógeno objetivo en muestras de hisopado rectal o fecal. El ensayo utiliza tecnología de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos, lo que permite una detección rápida y sensible sin necesidad de ciclado térmico. El procedimiento integra la preparación de la muestra, la lisis y la amplificación en un flujo de trabajo simplificado mediante el cartucho SampleDirect y el cartucho de prueba. El cartucho SampleDirect procesa la muestra para eliminar interferencias y enriquecer los ácidos nucleicos objetivo. La muestra procesada se combina luego con los reactivos de amplificación liofilizados contenidos en el cartucho de prueba, que incluye enzimas, cebadores (primers) y sondas. El cartucho de prueba se coloca en el dispositivo FLASH Base™ o FLASH Piccolo™, el cual mantiene automáticamente la temperatura de reacción requerida durante un tiempo determinado. Una vez completada la reacción, el usuario presiona la sección superior del cartucho de prueba hacia el cuerpo del cartucho, liberando la muestra ya reaccionada sobre una tira de flujo lateral integrada. La tira se revela en minutos: dos bandas (control, C, y prueba, T) indican un resultado positivo, y una banda (control, C) indica un resultado negativo.

Materiales suministrados

- 5 bolsas(“Bag A”) cada una con: 1 cartucho SampleDirect, 1 émbolo, 1 tubo de recolección y 1 tubo de transferencia con tapa gotero.
- 5 bolsas(“Bag B”) cada una con: 1 cartucho de prueba y 1 pipeta desechable pequeña.
- 1 tubo de Reagent T.
- 1 frasco de solución salina (Saline)
- 12 hisopos estériles.
- 5 bolsas de residuos.

Almacenamiento y manejo

Almacene todos los componentes del kit de prueba entre 4 °C y 25 °C.
Consulte la etiqueta de la caja del kit de prueba para conocer la fecha de vencimiento.

v.ES.2026.2

Advertencias y precauciones

1. Solo para uso veterinario in vitro.
2. Solo para uso profesional. El diagnóstico final debe ser realizado por un médico veterinario con licencia, considerando otros resultados de pruebas y hallazgos clínicos.
3. Solo para un único uso. No reutilice los cartuchos de prueba, cartuchos SampleDirect, émbolos, tubos de muestra, pipetas ni hisopos.
4. No utilice ningún componente si está dañado, presenta fugas o ha superado su fecha de vencimiento.
5. Manipule todas las muestras animales como potencialmente infecciosas.
6. Use guantes al manipular muestras animales.
7. No utilice pipetas desechables distintas a las incluidas en el kit.
8. Deseche todos los materiales utilizados como residuos biopeligrosos, conforme a las regulaciones locales.
9. Evite la contaminación cruzada utilizando un juego separado de componentes desechables para cada muestra, y trabajando en un área limpia y dedicada para el manejo de muestras.
10. Mantenga los cartuchos sellados hasta su uso. No retire el clip de seguridad ni presione el cartucho hasta el paso indicado en el procedimiento.
11. No exponga los cartuchos ni los reactivos a humedad, temperaturas extremas o luz solar directa.
12. No toque las partes internas del cartucho.
13. Realice la prueba inmediatamente después de cargar la muestra en el cartucho de prueba. Los retrasos pueden afectar el rendimiento.
14. Un manejo inadecuado durante el transporte, almacenamiento o uso puede reducir la sensibilidad de la prueba o causar resultados incorrectos.
15. Mutaciones o variaciones en la secuencia objetivo pueden causar resultados falsos negativos.
16. La contaminación del entorno de laboratorio o de las pipetas puede causar resultados falsos positivos.

Descripción de símbolos



Suficiente para una prueba



Fabricante



Solo para único uso



Límites de temperatura de almacenamiento



Frágil, manejar con cuidado



Consultar las instrucciones de uso



Mantener alejado de la luz solar



Mantener seco



No usar si el empaque está dañado

Para la versión digital de estas instrucciones de uso, visite vetid.flashdiagnostics.com.hk
FLASH Diagnostics, FLASH VetID™, FLASH Base™, FLASH Piccolo™ y el logotipo de FLASH Diagnostics son marcas comerciales de FLASH Diagnostics Limited© 2025. Todos los derechos reservados.



FLASH VetID™ para Muestras de Hisopado Rectal/Fecal

Solo para uso veterinario in vitro

Instrucciones de Uso

Aplicable a:

Kit de prueba	Patógeno Objetivo
FLASH VetID™ FPV (VID-01-06)	Virus de la panleucopenia felina
FLASH VetID™ CPV (VID-01-07)	Parvovirus canino tipo 2

Se recomienda ver los videos instructivos paso a paso disponibles en:

vetid.flashdiagnostics.com.hk

IMPORTANTE: Recolección de la muestra

Use el hisopo suministrado para recolectar la muestra. Seleccione el tipo de muestra según la situación real. Muestra aceptable: 1 hisopado rectal o 1 hisopado fecal.



Antes de recolectar cualquier muestra, sumerja el hisopo completamente en la solución salina durante 10 segundos.



Hisopado rectal aceptable




Hisopado fecal aceptable

A Coloque los componentes necesarios sobre su superficie de trabajo



B Procese las muestras después de la recolección

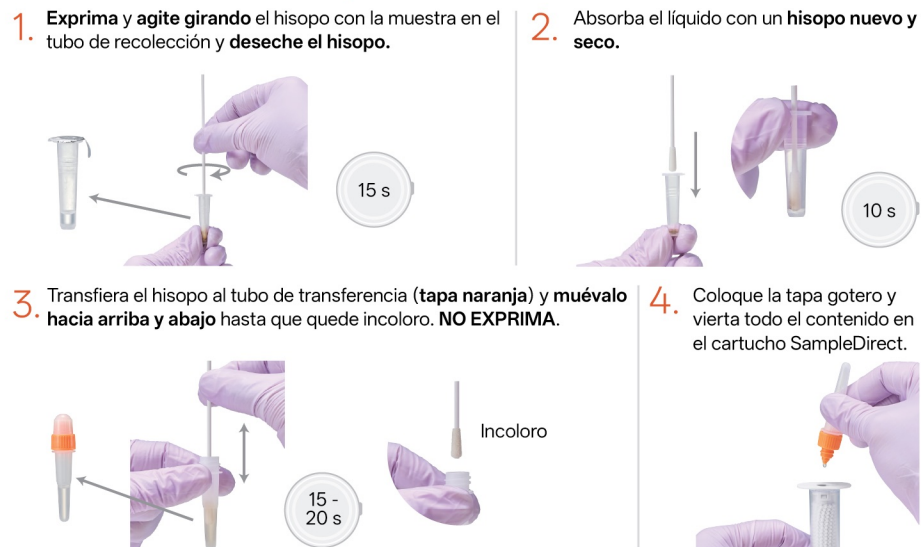


Transcurridos los 5 minutos del Paso 6:



C Ejecute la prueba



D Lea el resultado

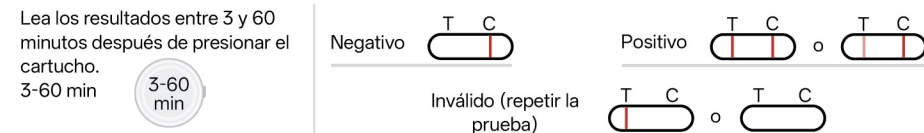

E Deseche los residuos

